

# Follo Stabilis




Follo Stabilis Eva Walker



Follo Stabilis Manuped



Follo Stabilis Hjelpear

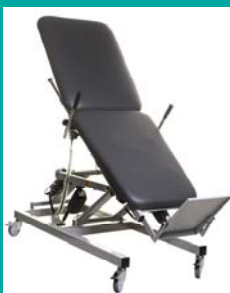

Follo Stabilis Tilt

Follo Stabilis er rehabiliteringsutstyr og hjelpemidler. Produktene er utviklet i samarbeid med rehabiliteringssentre. Stabilis dekker flere spektrere som forflytning, sirkulasjonstrening og avlastning. Flere av produktene kan benyttes i hjemmet.

## **Follo Stabilis Eva Walker:**

Follo Stabilis Eva Walker er et hjelpemiddel i rehabiliteringen av pasienter. Det gir pasienten mulighet for trygg forflytning og stimulerer til økt bevegelse og økt sirkulasjon ved bruk av muskler. Eva Walker finnes i flere modeller: manuell, gass og elektrisk i smale og brede utgaver. I barnemodeller leveres manuell og gass varianter samt smal og bred modell. Brukervekten på alle modellene er maks 150 kg.

## **Follo Stabilis Manuped:**

Follo Stabilis Manuped består av fire produkter, Manuped, Armtrener, Frittstående armtrener og Bentrener. Produktene er meget godt egnet til sirkulasjonstrening og terapeutiske formål. Motstanden kan kontrolleres med progressiv innstilling.

## **Follo Stabilis Hjelpear:**

Follo Stabilis Hjelpear er designet slik at den avlaster vekten på pasientens armer samtidig med at pasientens bevegelsesfriheten opprettholdes. Produktet leveres med slyngsats og vekter for å justere inn riktig motvekt etter pasientens behov. Hjelpearmen har flere justeringsmuligheter og den brede bunnrammens hjul kan låses.

## **Follo Stabilis Tilt:**

Follo Stabilis Tilt er et hjelpemiddel som gir pasienten mulighet til å komme opp i stående posisjon for å stimulere blodsirkulasjonen og forsiktig belastning av skjelettet. Follo Stabilis Tilt fungerer også som et hjelpemiddel ved forflytning. Produktet har fire elektromotorer med en håndkontroll som gjør funksjonsjusteringene enkle. Follo Stabilis Tilt leveres i to utgaver, en to delt pute og en med hel pute.

Produktene er i sin helhet produsert i Norge.

**Follo Futura AS**  
Brekkeveien 43, 1430 ÅS  
Telefon: +4764942165  
Fax: +4764942131  
E-post: [info@follo-futura.no](mailto:info@follo-futura.no)  
[www.follo-futura.no](http://www.follo-futura.no)

## Tekniske data

<b>Follo Stabilis Eva Walker</b> <b>109-modell</b>	Manuell		Gass		Elektrisk
	Barn	Voksen	Barn	Voksen	
Høyde min/maks	73 cm/99 cm	88 cm/128 cm	74 cm/105 cm	88,6 cm/129,7 cm	92,8 cm/128 cm
Pute bredde min / maks	62 cm / 81 cm	62 cm / 81 cm	62 cm / 81 cm	62 cm / 81 cm	62 cm / 81 cm
Lengde	79,5 cm	79,5 cm	79,5 cm	79,5 cm	79,5 cm
Vekt	14,3 kg	16,2 kg	14 kg	14,7 cm	20,6 kg
Maksimal brukervekt	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Min. snuradius bunnramme	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Bredde bunnramme	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Innv. Putemål min / maks	28,5 cm/49 cm	28,5 cm/49 cm	28,5 cm/49 cm	28,5 cm/49 cm	28,5 cm/49 cm

<b>Follo Stabilis Eva walker</b> <b>110-modell</b>	Manuell		Gass		Elektrisk
	Barn	Voksen	Barn	Voksen	
Høyde min/maks	73 cm/99 cm	88 cm/128 cm	74 cm/105 cm	88,6 cm/129,7 cm	92,8 cm/128 cm
Pute bredde min / maks	62 cm / 81 cm	62 cm / 81 cm	62 cm / 81 cm	62 cm / 81 cm	62 cm / 81 cm
Lengde	79,5 cm	79,5 cm	79,5 cm	79,5 cm	79,5 cm
Vekt	14,3 kg	16,2 kg	14 kg	14,7 cm	20,6 kg
Maksimal brukervekt	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Min. snuradius bunnramme	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Bredde bunnramme	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Innv. Putemål min / maks	28,5 cm/49 cm	28,5 cm/49 cm	28,5 cm/49 cm	28,5 cm/49 cm	28,5 cm/49 cm

<b>Follo Stabilis Manuped</b>	Manuped	Armtrener	Bentrener	Frittstående armtrener
Høyde	110 cm	45 cm	40 cm	110 cm
Bredde	77 cm	59,5 cm	77 cm	77 cm
Lengde med fotplater	114 cm		111 cm	111 cm
Lengde uten fotplater	56 cm	56 cm	54 cm	54 cm
Vekt med fotplater	20,9 kg		15,2 kg	16,8 kg
Vekt uten fotplater	14,5 kg	8,3 kg	8,5 kg	10,1 kg

<b>Follo Stabilis Hjelpear</b>	
Høyde	180 cm
Bredde	140 cm
Lengde	140 cm
Vekt	28 kg
Maksimal belastning i snor	3 kg

<b>Follo Stabilis Tilt</b>					
Varenummer	Antall puter	Lende / bredde	Høyde	Vekt	Maks belastning
105-806001	2	197 cm / 70 cm	55 cm / 93 cm	112 kg	170 kg
105-806011	1	197 cm / 70 cm	55 cm / 93 cm	112 kg	170 kg
Tippningsvinkel	0-80 grader				
Fotplatevinkel	-20 / +5 grader				
Ryggstøttevinkle	0 –35 grader				